

praktisch

- Overal door het **hele gezin** te gebruiken
- Gemakkelijk mee te nemen
- 4 zuignapjes, geschikt voor elke soort steek



snel

ASPIVENIN® een pijnloze ingreep

Ondanks de sterke zuiging is de ingreep pijnloos want het weefsel wordt op geen enkele wijze beschadigd. Integendeel, de pijn van de steek of de beet wordt verzacht en verdwijnt snel.

effectief

De **ASPIVENIN®** mini-pomp, vervaardigd uit hoogwaardig technologisch materiaal, zorgt voor een onmiddellijk en constant vacuüm van bijna 800 millibar. Dit is 10 keer krachtiger dan met mondzuiging.

ASPIVENIN® zonder risico

Er zijn geen contra-indicaties (behalve oogleden en genitaliën). Het product veroorzaakt geen beschadigingen en heeft ook geen nawerkingen. Het mag bij iedereen toegepast worden, ongeacht leeftijd of algemene gezondheidstoestand, dus zowel bij kleine kinderen als volwassenen.

ASPIVENIN®

Neemt weinig plaats in beslag want het heeft slechts de omvang van een zaklamp en een gewicht van maar 30 gram. U heeft het altijd bij de hand. Dankzij het zogenaamde "dubbele kamer-systeem", kan het pompje met één hand binnen enkele seconden gebruikt worden. U kunt zich zo als het ware zelf behandelen na een steek of beet in hand of arm.

Plaats, zonder te forceren, het meest geschikte zuignapje op het uiteinde van het pompje en trek de zuiger helemaal uit.

Plaats **ASPIVENIN®** met de zuignap op de beet of steek en houd hem met één hand vast.

Druk nu de zuiger helemaal in, zodat het pompje zich vacuüm zuigt. U voelt nu een krachtige zuiging. Laat de **ASPIVENIN®** gedurende twee à drie minuten z'n werk doen. Afhankelijk van de steek of beet kan deze tijd verlengd worden zonder dat er ongemak ontstaat.

Verhoging van het vacuüm-effect dat de verspreiding van het gif vertraagt en/of tegen gaat.

Ontspan de zuiger door met de duim het topje van de zuiger omhoog te drukken. Neem de **ASPIVENIN®** weg. Reinig de zuignap met een ontsmettend middel (b.v. alcohol).




DISTRIBUTEUR VOOR BENELUX:
IMGROMA B.V.
Postbus 694, 6200 AR Maastricht
Consumenten infolijn: 0900 - 101 101 5 (€ 0,25 p/m).

eenvoudig



Genieten in alle rust

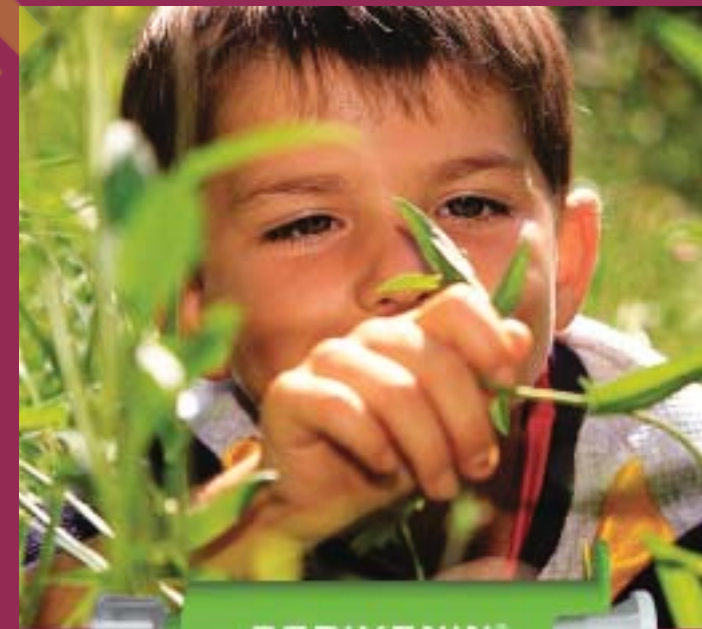

STEKEN EN BETEN

De eerste hulp bij alle soorten gif



**Steken en beten:
een vaak onderschat risico!**

**Zo'n 800.000 mensen in Nederland*
ondervinden ernstige gevolgen na een
insectenbeet. Dat cijfer geldt vooral voor
25 % van de plattelands bevolking en /of
inmikers. De ernstige gevallen uiteten zich
voornamelijk in allergische reacties.**

Ieder jaar - **zelfs in Europa** - zijn insectenbeten de oorzaak van meerdere ongelukken met min of meer gevaarlijke consequenties. Sommige hebben zelfs een dodelijke afloop. Insectenbeten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal gevallen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Steken en beten zijn gevaarlijk.

Van iedere **vijf** miljoen mensen die wereldwijd jaarlijks slachtoffer worden van steken en beten van slangen, schorpioenen of giftige insecten sterven er

100.000 !

Bron: Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

* 5% van de totale bevolking.



Kleine en grote gevaren

Meestal krijgt men een pijnlijk gevoel, de huid wordt rood en hard (een bult). Het lijkt erger dan het is. Maar soms zijn de gevolgen ernstig. Dit kan zich uiteten in uitslag, vergezeld van een onaangenaam gevoel van benauwdheid. Maar wanneer er sprake is van een serieus geval kan er oedeem in het gezicht ontstaan, al of niet in combinatie met een benauwd gevoel op de borst, pijn in de buikstreek, misselijkheid, duizeligheid en diarree. Soms heeft het slachtoffer zelfs moeite met ademen en spreken. Uiteindelijk kan er gebeuren wat het meest gevreesd wordt: het slachtoffer wordt blauw doordat de hartslag vermindert, verliest het bewustzijn en zijn leven is in gevaar.

Voorkomen is beter dan genezen. Wees altijd voorzichtig: Loop niet blootvoets, bescherm uw picknick spullen en blijf kalm als u bedreigd wordt. **Door het toevoegen van ASPIVENIN® aan uw E.H.B.O.-koffer, bent u in staat om direct een eerste hulp ingreep te verrichten na een steek of beet.** In ernstige gevallen blijft een medisch onderzoek noodzakelijk, dat zo snel mogelijk moet plaatsvinden.



Wespen
Horzels



Muggen
Teketen



Schorpioenen
Spinnen



Slangen



Steekvisjes
Kwallen



ASPIVENIN® is effectief

Het zuigt een groot deel van het gif op. In Frankrijk, aan het PASTEUR-Instituut (laboratorium voor immuno-allergie), is ondermeer onderzoek verricht naar gif uit bijensteken. Aangevoerd werd dat een groot deel van het geïnjecteerde gif werd opgezogen. Hierdoor nam de ernst van de vergiftiging af.

Een onderzoek met betrekking tot slangenbeten, gerealiseerd in laboratoria in de VS, toonde aan dat binnen 3 minuten 8 tot 40 % van het gif werd verwijderd. **Het pijnlijke gevoel verminderde en de zwelling nam af.**



ST E K E N E N B E T E N